

simplicast[®] *kann Alles* - *bloß viel preiswerter!*

simplicast[®] ermöglicht enorme Kostenreduzierung gegenüber hochgoldhaltigen Legierungen und ist nur geringfügig teurer als NEM Legierungen weil man die Gusskegel, wie bei Goldlegierungen, wieder vergießen kann!

simplicast[®] ist eine Universallegierung Typ 4 und eignet sich für fast alle zahntechnische Indikationen! (z. B. für Teleskope mit echter Friktion - Vickershärte 245 HV5 - wie z.B. Degulor M)

simplicast[®] ist angussfähig an Gold-Kunststoff-Abutments!

simplicast[®] ist wiedervergießbar - so wie Goldlegierungen!

simplicast[®] ist aufbrennbar mit fast allen Keramikmassen!

simplicast[®] ist im höchsten Maße biokompatibel!

Ionenabgabe nach 7 Tagen: 7,05 µg/cm²
nach 30 Tagen: 1,91 µg/cm²


(durchgeführt von IWS - Wolfgang Semrau, vom Land Bremen bestellter und vereidigter Sachverständiger für Korrosionsschäden und Korrosionsschutz)

Legierungsbestandteile von **simplicast[®]**

CO	Cr	Ga	Mo	In	Pt	Au	W,Si,Mn, Fe
54,5%	25,0 %	6,0 %	4,5 %	3,5 %	2,0 %	1,5 %	< 1



simplicast[®] - *immer goldrichtig!*
<http://www.simplimetals.de>

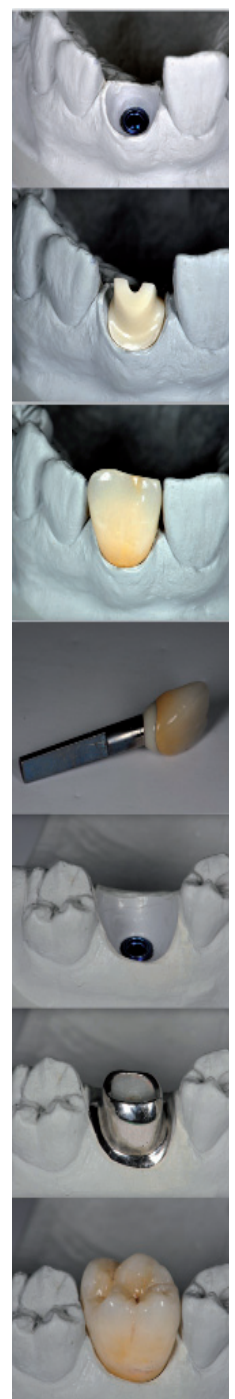

Der Patient steht im Mittelpunkt unseres Handelns - bieten wir ihm das Beste zum fairen Preis!

Wir machen Schluss mit dem Vorurteil, dass Gold das Maß der Dinge ist!


**- erzielen Sie Wettbewerbsvorteile für Ihre Praxis u. Labor
und riesige Kostenersparnis für Ihre Patienten!
(gleichzeitig verringern Sie die Kosten Ihrer Lagerhaltung erheblich)!**

**Ersetzen Sie immer teurer werdende Goldlegierungen durch
simplicast® - die Universallegierung Typ 4!**

Die innovative Rezeptur und modernste Herstellungsmethoden machen simplicast® so einzigartig! Unsere detaillierten Arbeitsanweisungen sorgen für Prozesssicherheit - die geringe Härte von 245 HV5 (Degulor M) machen es Ihnen und Ihren Mitarbeitern leicht, qualitativ hochwertige Metallgerüste für alle Indikationen zu erstellen - ob Teleskope mit echter Friktion oder Implantate im Anguss und Metall- Keramik-Arbeiten im Schicht- u. Press-on-Metal- Verfahren.

simplicast® ist in Bezug auf Biokompatibilität den meisten Goldlegierungen überlegen was unsere umfangreichen Tests belegen!

Folgendes Beispiel einer 3-gliedrigen Implantatbrücke verdeutlicht, wie groß die Kosteneinsparung ist - der Materialpreis pro Einheit verbilligt sich auf etwa ein Zehntel gegenüber dem in hochgoldhaltiger Legierungen! Bei Teleskoparbeiten beträgt die Ersparnis nicht selten 1.000,- € und mehr! Sie benötigen keine Galvanokappen (auch diese kosten viel Geld) - die geringe Härte von simplicast® (245 HV5) gewährleistet Teleskope mit echter Friktion herzustellen!

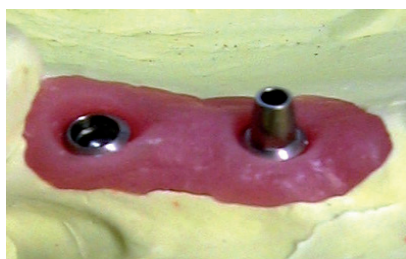

	Gussgewicht	Kosten	Kosten / Einheit
Bio-Aufbrennlegierung abzügl. Rabatt 43,50 €/g	12,8 g	556 €	185 € / Einheit
simplicast® abzügl. Rabatt 8,00 €/g	6,4 g	52 €	18 € / Einheit

Beispiel: Stand 09 2011

Vertriebsbüro Nord · Fon +49 (0) 4541 859933 · Fax +49 (0) 4541 859932
Vertriebsbüro Süd · Fon +49 (0) 89 18944507 · Fax +49 (0) 89 18944508

Industrie meets Handwerk!

simplicast® und simplibond® NF sind ein unzertrennliches Team!

Multilayerschichten werden in der Industrie angewendet um verschiedenartige Werkstoffe auf chemische und mechanische Weise dauerhaft miteinander zu verbinden. In unserem Fall sind diese Werkstoffe Metall und Keramik die sich physikalisch und chemisch vollkommen unterschiedlich verhalten.

Was bewirkt **simplibond® NF** Multilayer?

simplibond® NF sorgt dafür, dass das Gerüst optimal benetzungsfähig ist!
simplibond® NF ist eine intermetallische Glasphase und schafft die Grundlage (ein Interface) für die Verbindung zwischen Metall und Keramik!
simplibond® NF verbindet dieses Interface chemisch mit der aufgebrannten Keramik und verbessert den Haftverbund wesentlich!
simplibond® NF unterbindet das Chromoxid Wachstum und sorgt für Farbstabilität auch nach zahlreichen Bränden! (Chromoxid „wächst“ bei jedem Brand - dadurch verringert sich der Haftverbund stetig).




simplibond® NF ist speziell für die jeweilige Indikation entwickelt und funktioniert bei allen NEM und EMF Legierungen.

- ▶ ML I - für die Schichtkeramik
- ▶ ML II - für die CAD/CAM Technik
- ▶ ML IV - für „Press-on-Metal“ Technik

Metall-Keramik-Verbund in Verbindung mit simplibond Multilayer:
Rissbeginnprüfung nach Schwickerath gem. DIN EN ISO 9693:2000 Haftverbund 37 Mpa
(Wieland Dental Ceramics)

Haftfestigkeitsmessungen gem. DIN EN ISO 9693: 1999

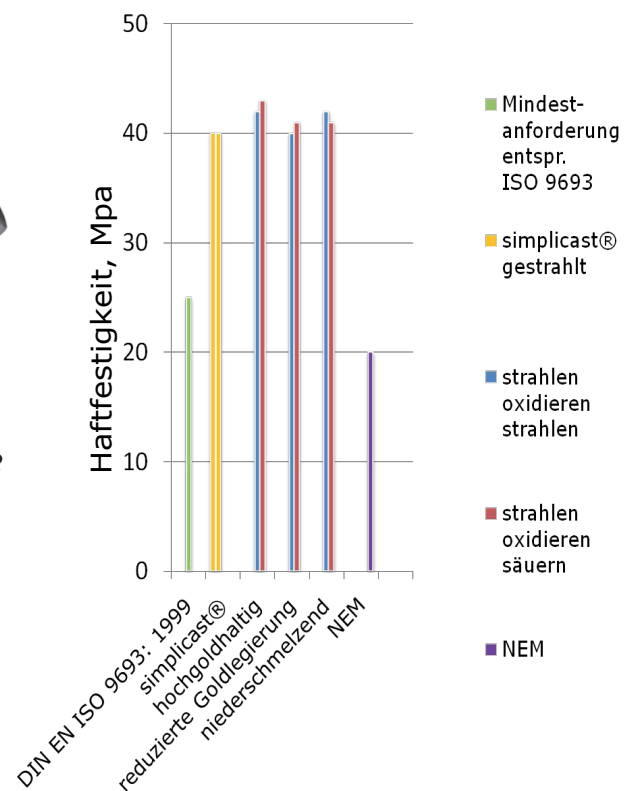

Patentierter Metall-Keramik-Verbund

Vertriebsbüro Nord · Fon +49 (0) 4541 859933 · Fax +49 (0) 4541 859932
Vertriebsbüro Süd · Fon +49 (0) 89 18944507 · Fax +49 (0) 89 18944508

simplicast® zur Probe!

... damit Sie sich selbst ein Urteil bilden können, sollten Sie *simplicast®* ausprobieren!

dazu machen wir folgendes Angebot:

Bestellen Sie mal 25g oder 50g ***simplicast®*** (und 2g ***simplibond® NF Multilayer*** wenn Sie auf ***simplicast®*** auch aufbrennen möchten). Zudem erhalten Sie unsere Info CD Rom mit detaillierten Verarbeitungsanleitungen/Sicherheitsdatenblättern und allen Informationen zu unsern, auf ***simplicast®*** abgestimmten Systemkomponenten, die Sie sicher und schnell zu besten Ergebnissen führen. Sie erhalten zahlreiche Tipps und Tricks zum Thema Verarbeitung von Kobalt-Basis-Legierungen.

Gratis dazu erhalten Sie Probebeutel unserer sehr gut funktionierenden und präzise steuerbaren Einbettmasse **Balance Vest** mit allen Informationen und Mischungsverhältnissen zur zielgerichteten Herstellung von Tele-Sekundärteilen aus Modellierkunststoff und die Arbeitsanweisung für den perfekten Anguss an Gold-Kunststoff-Abutments mit ***simplicast®***.

Sie können dann probieren – gießen und wiedervergießen (das geht wie Sie es von Ihren Goldlegierungen gewohnt sind – im Gegensatz zu NEM) – Sie können mich/uns jederzeit anrufen, wenn sich Fragen oder Probleme ergeben.

Sollten Sie wider Erwarten nicht zufrieden sein, schicken Sie einfach das unvergossene Metall zur Gutschrift zurück!

Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, drucken Sie bitte die nächste Seite (*hier im Anhang*) aus und faxen diese, ausgefüllt, an die unten angegebene Faxnummer in Ihrem Zuständigkeitsgebiet.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Bestellung und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen.

www.simplimetals.de

Vertriebsbüro Nord · Fon +49 (0) 4541 859933 · Fax +49 (0) 4541 859932
Vertriebsbüro Süd · Fon +49 (0) 89 18944507 · Fax +49 (0) 89 18944508

simplicast® Faxbestellformular/Lieferschein

simplicast® Universallegierung /g (VK 12,00 € - 3,50 € Rabatt)

zuzüglich 0,50 € bei Lastschriftinzug

8,00 €

(simplicast® ist erhältlich in 25g u. 50g Gebinden)

Simplibond NF Verbundopaquer (für alle NEM & EMF Legierungen) 2g

38,00 €

Simplibond NF Verbundopaquer (für alle NEM & EMF Legierungen) 5g

89,50 €

simpliflux Lötpaste (für alle Legierungen) 5g Dose

17,50 €

simplimelt Schmelzpulver (für alle Legierungen) 5g Dose

15,50 €

simplimetal Lot 1070°C (vor dem Brand) je Gramm

15,30 €

simplimetal Laserschweißdraht Ø 0,35, ca. 1,55 g Rolle

72,40 €

simpli oxistop Passivierungsmittel 250ml & Tauchdose

19,90 €

simpliacid 250ml & Ultraschalldose

12,90 €

balance vest universal Einbettmasse (38 x 160g Beutel)

61,00 €

balance vest universal Einbettmasse (15 x 400g Beutel)

60,00 €

balance Vest liquid (1 Lit.)

15,00 €

Versandkostenpauschale (versicherter Versand)

6,00 €

(Stand 09.2011)

Laborstempel / Adresse

Tel./ @

Datum

Unterschrift

Für die Teilname am Lastschriftverfahren tragen Sie bitte Ihre Kontoverbindung ein:

Kontonummer:

BLZ:

Institut:

Name des Kontoinhabers:

K.Fleischfresser Dentalerzeugnisse • Tel. +49(0)89 18944508 • Fax +49(0)89 18944508

Birkenau 17 • 81543 München / Germany

dentale Handelsvertretung T. Wess • Tel. +49(0)4541 859933 • Fax +49(0)4541 859932

Giesensdorfer Weg 48, 23909 Ratzeburg

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur unvergossenes Material zurücknehmen können
(beachten Sie unsere AGB's)